

Per fare sport

Ecco una selezione di dispositivi individuali concepiti per la pratica delle attività outdoor (ma anche per l'uso quotidiano) durante la fase di convivenza con il Coronavirus

I CRAZY I SPORT MASK LIGHT

UTILIZZO / attività outdoor aerobica
MATERIALE ESTERNO / Revolutionary "carvico" microfibra
FILTRO INTERNO / tre strati TNT - lavabile
CARATTERISTICHE TECNICHE /
 • 9 g di tecnologia + 4 g per il filtro
 • nosello regolabile ed ergonomico
 • doppio elastico posteriore con una clip di regolazione
 • filtro amovibile con tre velcri
 • filtro e mascherina lavabili > oltre 20 volte con garanzia di tenuta 100%
 • sacchetto di sicurezza con trattamento per riporto dopo l'uso

TRATTAMENTI SUL TESSUTO / HeiQ Viroblock + water repellent + Eco CO Fluorine (senza fluoro)
CERTIFICAZIONI / HeiQ Viroblock
MANUTENZIONE / lavare dopo l'uso a 50° - non a secco
TAGLIE DISPONIBILI / M - L - Kid
MINIMO ORDINE / due sul sito - una presso i dealer Crazy - 50 per i dealer
PREZZO CONSIGLIATO / 15 euro
ALTRE INFO UTILI / vedi scheda tecnica e scheda trattamento HeiQ Viroblock




I DRY HEAT I ACTIVE MASK

UTILIZZO / mascherina filtrante studiata per lo sport attivo
MATERIALE ESTERNO / Dhtech400 - due strati di tessuto ad alta percentuale di polipropilene
FILTRO INTERNO / 100% polipropilene



CARATTERISTICHE TECNICHE / ergonomica, anallergica, idrorepellente, antibatterica, funzionale, lavabile
TRATTAMENTI SUL TESSUTO / la fibra di polipropilene ha proprietà intrinseche di idrorepellenza e batteriostaticità
CERTIFICAZIONI / Oeko-Tex
MANUTENZIONE / lavaggio in lavatrice a 60 °C
TAGLIE DISPONIBILI / M - L (uomo/ donna)
MINIMO ORDINE / 100 pezzi (per i rivenditori)
PREZZO CONSIGLIATO / 14,90 euro
ALTRE INFO UTILI / ferretto stringinoso, vari colori - dryheat.it - dhtech.it
DISTRIBUTORE / Athesis srl +39.0442.590099 - info@dryheat.it

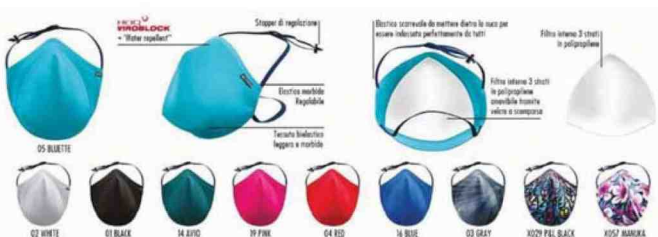

DISTRIBUTORE / Crazy - 0342.706371 - info@crazyidea.it - crazy.it

COSA C'È DA SAPERE

LA MASCHERINA PRESERVA DA OGNI CONTAGIO?

La mascherina non preserva al 100% dal contagio e il suo utilizzo, per ridurre le possibilità di trasmissione del virus, deve essere sempre accompagnato da un'accurata igiene personale (lavarsi le mani e non toccarsi occhi e naso) e dal distanziamento sociale.

QUALI SONO I DIVERSI TIPI DI MASCHERINE?

Oltre alle mascherine cosiddette chirurgiche, esistono anche le FFP1, FFP2 e FFP3, con o senza valvola.

IN COSA DIFFERISCONO?

• Mascherine chirurgiche

Sono dispositivi medici che proteggono in parte se stessi e gli altri. La loro funzione è quella di bloccare il propagarsi di goccioline emesse per via orale, in caso di un colpo di tosse o di uno starnuto, o semplicemente parlando. Tuttavia non garantiscono il blocco del virus disperso in aerosol in quanto non sono a tenuta sul viso dell'utilizzatore e non hanno una funzione filtrante in fase inspiratoria.

• Mascherine FFP1, FFP2 e FFP3

Si distinguono in primo luogo per la loro efficienza filtrante che cresce all'aumentare del numero: le FFP1 hanno una capacità filtrante pari all'80%, le FFP2 superiore al 94% e le FFP3 superiore al 99%. In più, si distinguono per la presenza o meno della valvola.

• Mascherine senza valvola

Sono Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) che proteggono sia chi le utilizza che gli altri, bloccando la dispersione del virus sia in entrata che in uscita, poiché sono a tenuta sul viso e sono impermeabili con un processo di "saldatura" in modo che non ci

siano cuciture, perforazioni sul tessuto da cui potrebbero passare microparticelle. Per questo vengono solitamente utilizzate da medici e personale sanitario.

• Mascherine con valvola

Proteggono soltanto l'utilizzatore, perché impediscono l'ingresso del virus, ma non bloccano totalmente il virus verso l'esterno.

• Certificazioni

Le mascherine, per garantire questi livelli di protezione, devono essere certificate. Le mascherine chirurgiche, per esempio, sono classificate come DM (Dispositivo Medico) e sono marcate CE in accordo al regolamento europeo 2017/745 e alla normativa tecnica EN 14683:2019. Quelle FFP2 e FFP3 sono invece dei DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) e sono marcate CE in accordo al regolamento europeo 2016/425 e alla normativa tecnica EN 149:2009.

COME VANNO INDOSSATE LE MASCHERINE?

Le mascherine vanno indossate coprendo sia naso che bocca, anche quelle chirurgiche. Prima di indossarle è bene lavarsi le mani.

COME SI TOLGONO?

Per evitare il rischio di reinfettare o infettarsi, bisogna fare particolare attenzione alla manipolazione della mascherina stessa perché, sia la superficie esterna del dispositivo individuale che le mani (o i guanti), possono essere contaminati dal virus. Bisogna quindi prima di tutto lavarsi accuratamente le mani, poi togliere la mascherina indossata sul viso utilizzando gli elastici, cercando di evitare di toccarla nella sua parte interna. Subito dopo, lavarsi di nuovo le mani.